



Speciální prohlášení: Veškerý obsah v tomto dokumentu byl pečlivě ověřen. Pokud se v obsahu vyskytnou tiskové chyby nebo nejasnosti, naše společnost si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci. Kromě toho, pokud dojde k technickým vylepšením produktu, budou zahrnuta v nové verzi manuálu bez předchozího upozornění. Pokud dojde ke změnám vzhledu nebo barvy produktu, platí skutečný produkt nacházející se uvnitř balení.

**V souladu s národními normami:** GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Výrobce: NEDES, s.r.o.

Adresa: Hlavná 35, 919 21 Zeleneč, Slovakia


---



**EPIC X10**

**Luxusní Masážní Křeslo**

## Návod k použití

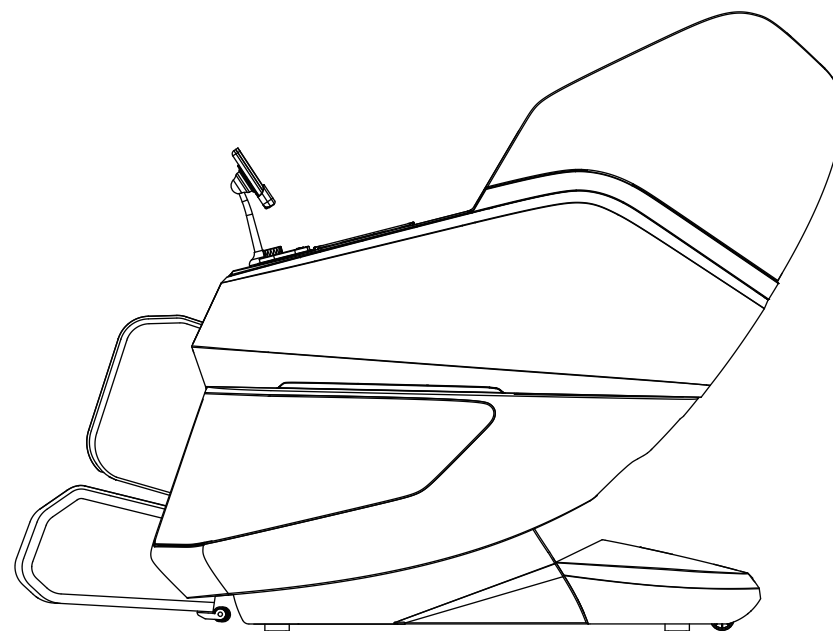

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte obsah tohoto manuálu.

Manual + more informations on  
Handbuch + weitere Informationen zu  
Návod + viac informácií na  
Návod + více informací na  
Kézikon v + további információ  
Instrukcje + więcej informacji  
Instrucțiuni + Mai multe informații la



[www.nedes.eu](http://www.nedes.eu)

## Obsah




Děkujeme, že jste zakoupili toto masážní křeslo. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, zejména sekci o bezpečnosti, abyste správně používali toto masážní křeslo. Po přečtení si tento návod uschovejte na bezpečném místě a v případě potřeby se na něj odvolávejte.

<b>I . Bezpečností pokyny</b>	-----	1-2
<b>II . Před každou masáží</b>	-----	3
<b>III. Specifikace produktu</b>	-----	4
<b>IV. Řešení problémů</b>	-----	4
<b>V . Instalace produktu</b>	-----	5-6
<b>VI. Údržba a způsoby skladování</b>	-----	7
<b>VII .Připojení Bluetooth k přehrávání hudby</b>	-----	8
<b>VIII. Popis jednotlivých částí</b>	-----	9
<b>IX. Ovládací panel</b>	-----	10
<b>X . Pokyny k obsluze masážního křesla</b>	-----	11-12





Vylepšení a změny designu a funkcí mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Prosím, podívejte se na skutečný produkt.

## I Bezpečnostní pokyny

### Upozornění



	Nepoužívejte napájení mimo uvedeného napětí, abyste předešli elektrickému zkratu nebo poruše.
	Pokud jsou napájecí kabel a zásuvka poškozené nebo je zásuvka uvolněná, okamžitě přestaňte používat, abyste předešli elektrickému zkratu nebo poruše.
	Aby se předešlo úrazům nebo nehodám, doporučuje se, aby osoby, které nejsou schopny se vyjádřit nebo samostatně ovládat přístroj, tento masážní přístroj nepoužívaly.
	Nenechávejte děti používat nebo si hrát s přístrojem a neseďte ani nestůjte na opěrce zad, opěrce rukou nebo opěrce nohou.
	Kabel nesmí být zlomený, zkroucený, napnutý, zamotaný nebo silně stlačený (zejména ne pod přístrojem). Zakazuje se kroutit a skladovat příslušenství, jako jsou polštáře na masážní křesla, protože by to mohlo způsobit zkrat a elektrickou poruchu.
	Neumisťujte do vlhkých míst, jako jsou koupelny, abyste předešli elektrickému zkratu, poruchám a korozi.

### Pozor







	Výchozí doba použití každého programu je do 15 minut. Pokud potřebujete prodloužit nebo zkrátit dobu použití, můžete to provést pomocí časových operací. Doporučuje se nemasírovat stejnou část těla déle než 15 minut. Dlouhodobé používání může způsobit svalovou bolest. (Doporučení) Celková doba používání za den by měla být omezena na 60 minut.
	Pokud se během používání objeví jakékoliv neobvyklé pocity nebo abnormality v těle, okamžitě přestaňte používat.
	Zkontrolujte, zda je provozní spínač a funkce resetování v správném stavu, abyste předešli nehodám nebo zraněním.
	Po delším používání je nutné zkontrolovat, zda masážní křeslo funguje správně, před jeho dalším použitím.
	Při výpadku proudu je nutné okamžitě vypnout napájení a vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli nehodám při opětovném zapnutí.
	Když se zařízení nepoužívá, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a umístěte zástrčku minimálně 30 cm nad zem, abyste předešli stárnutí izolace způsobenému prachem a vlhkostí, což může vést k úniku elektrického proudu.
	Při masáži rukou je nutné odstranit tvrdé předměty, jako jsou hodinky a šperky, abyste předešli úrazům nebo zraněním.
	Během používání neusněte. Nevědomé používání může způsobit nepohodlí nebo zranění.
	Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, jako jsou sporáky, nekuřte během používání a nepoužívejte na vytápěcích zařízeních, jako jsou elektrické deky, abyste předešli vzniku požáru.
	Nepoužívejte bezprostředně po jídle, abyste předešli nepříjemnostem.
	Nepoužívejte po konzumaci alkoholu, protože to může vést k nehodám nebo zraněním.
	Nepoužívejte masážní křeslo současně více než dvě osoby, abyste předešli poruchám nebo zraněním.
	Nepoužívejte na holou pokožku; přímé masírování pokožky může způsobit bolest kvůli intenzitě.
Neseďte si ani nevstávejte v poloze, kdy jsou nohy zdvižené, a přísně se zakazuje stát na masážní části nohou, pokud pozice ještě není zcela vertikální, abyste předešli nehodám nebo zraněním.	

## I Bezpečnostní pokyny

- Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tyto „Bezpečnostní pokyny“ pro správné používání. Tyto pokyny jsou zaměřeny na bezpečné a správné používání produktu a prevenci škod nebo zranění jiných osob.
- Pokyny jsou rozděleny na „Varování“ a „Opatření“, které označují úroveň nebezpečí nebo poškození. Obě kategorie obsahují důležité bezpečnostní informace, proto je prosím dodržujte.

 <b>Upozornění</b>	Při nesprávném použití může vzniknout potenciální riziko zranění uživatele.
 <b>Pozor</b>	Při nesprávném použití může vzniknout potenciální riziko zranění uživatele nebo poškození zařízení.


### Symbyly

	 Symbyly označují obsah s varováními a upozorněními. (Příklad vlevo označuje obecná varování a upozornění.)
	 Symbol znamená zakázané chování. Konkrétní pokyny jsou uvedeny na obrázku (například: demontáž je zakázaná na levém obrázku).
	 Symbyly označují, co je povinné nebo doporučené. Konkrétní pokyny jsou uvedeny na obrázku (například: odpojení od elektrické zásuvky je znázorněno na levém obrázku).

Po přečtení si návod, prosím, uložte na bezpečné místo, kde k němu budete mít kdykoli přístup.

**Osobám nevhodné používání tohoto produktu: Pokud máte některý z následujících symptomů, prosím, poraďte se se svým lékařem a použijte produkt pouze pod lékařským dohledem.**

### Upozornění

	Osoby, pro které je používání tohoto produktu nevhodné: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osoby používající lékařské elektronické zařízení, jako jsou kardiostimulátory, které jsou implantovány v těle.</li> <li>- Osoby, které jsou léčeny lékařem, zejména pokud pociťují abnormality v těle.</li> <li>- Pacienti s maligními nádory, akutními onemocněními, srdečními chorobami, těžkou hypertenzí atd. (Vyžaduje se lékařský dohled).</li> <li>- Těhotné ženy nebo osoby v období menstruace.</li> <li>- Osoby s osteoporózou, pacienti s frakturami obratlů.</li> <li>- Osoby s kožními poraněními, které potřebují klid na zotavení.</li> <li>- Osoby s tělesnou teplotou nad 38 stupňů (v období horečky).</li> <li>- Produkt se zahřívá, a proto je nutná opatrnost při používání u osob, které nejsou citlivé na teplo. (Vyžaduje se lékařský dohled).</li> <li>- Mentálně postižené osoby nebo nezletilí musí používat produkt pod dohledem.</li> </ul>
---	---

## II Před každou masáží

### Zapněte napájení

1. Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na napájecím kabelu odpovídá podmínkám používání, a zda je na konci elektrické zásuvky připojen uzemňovací drát.
2. Zapněte hlavní vypínač. Hlavní vypínač se nachází na spodní straně zadní části zařízení. Po zapnutí napájení se rozsvítí indikátor vypínače.

#### TIPY

**Pokud používáte masážní křeslo v chladném prostředí, nedoporučujeme náhle zvyšovat teplotu místnosti. Doporučujeme postupné zvyšování teploty na normální úroveň. Pokud je masážní křeslo umístěno na chladném místě a následně přesunuto na teplé místo, doporučujeme ho používat až po hodině od přesunu. Okamžitě použití může vést k poruše masážního křesla.**

### Kontrola před používáním

#### 1. Zkontrolujte okolí


① Ujistěte se, že v okolí masážního křesla, včetně zadní části, přední části, spodní části nohou atd., nejsou žádní lidé, domácí zvířata ani předměty. (Režim pohotovosti)

#### 2. Zkontrolujte stav masážního křesla

① Před použitím prosím zdvihnete zadní polštář a zkontrolujte, zda nejsou části opěradla a jiné části látky poškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození (i malé), okamžitě přestaňte zařízení používat, odpojte ho od napájení a požádejte o opravu.

② Zkontrolujte, zda napájecí kabel, kabel displeje na ovládání nebo jiné předměty nejsou zaseknuté v masážním křesle.

③ Ujistěte se, že napájecí konektor je úplně zasunutý do zásuvky, a zabraňte tomu, aby se na napájecí konektor dostaly kovové části nebo prach, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

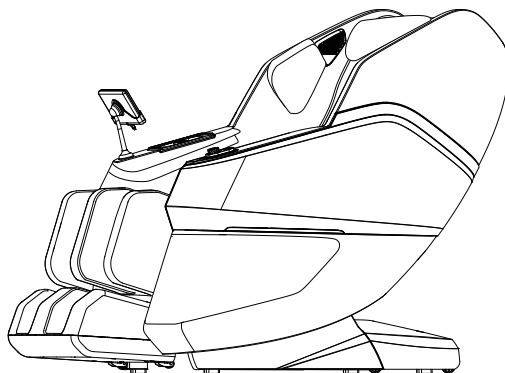

## III Specifikace produktu

Název	Massage Chair
Product Model	X10
Váha N./Váha B.(Kg)	84Kg/101Kg
Napětí	120W
Napájení	220-240V~
Doporučený čas	15min
Doporučená frekvence	50-60Hz
Velikost vnějšího obalu	1770*780*892.5mm
Velikost v stojící poloze	1550*785*1150mm
Velikost v nakloněné poloze	1650*785*870mm

## IV. Řešení problémů

Pokud nastane neobvyklá situace, abyste předešli nehodám, přestaňte výrobek používat a odpojte ho od napájení. Pokud následující způsoby řešení problémů nevedou k nápravě, kontaktujte servisní středisko.

Možné závady	Řešení
Zvuk během provozu	Zvuk vycházející ze strukturálního designu nemá žádný vliv na funkci.
Konektor je zapojen do elektrické zásuvky, ale masážní křeslo nefunguje.	1.Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen a zda je zapnut proud. 2. Zkontrolujte, zda je vypínač na masážním křesle v poloze "I" 3. Když je vypínač v poloze „I“, světlo na spínači by mělo svítit červeně. Pokud nesvítí, odpojte napájecí kabel, zkontrolujte držák pojistky a pojistkovou trubici, zda jsou na svém místě.
Během používání lze ovládat dálkový ovladač, ale masážní křeslo nereaguje.	Po delším používání, pokud teplota masážního křesla stoupne příliš vysoko, masážní křeslo se automaticky přepne do režimu ochrany proti přehřátí. Prosím, vypněte napájení a dočasně jej nepoužívejte 30 až 60 minut, aby se umožnilo vnitřní ochlazení zařízení.
Během používání, pokud je možné ovládat ovladač a masážní křeslo přestane fungovat	Po aktivování automatické časovačové funkce, pokud uplyne nastavený čas, prosím, stiskněte tlačítko znovu k ovládání.


## V Instalace produktu

### Nastavení masážního křesla

V okolí křesla by měl být ponechán prostor a křeslo by mělo být umístěno na rovné ploše.

Tip: Když jsou nohy zvednuté, sklopte opěradlo, abyste se vyhnuli kolizím. Vpředu byste měli ponechat více než 19cm a vzadu více než 8cm volného prostoru.


Tip: Doporučuje se položit pod masážní křeslo podložku, aby se předešlo poškození podlahy nebo koberce. Vyhněte se umístění na místa s dlouhodobým vystavením slunečnímu záření, topným zařízením a jiným vysokoteplotním místům v blízkosti, aby nedošlo k zabarvení nebo zhoršení kvality koženého potahu.

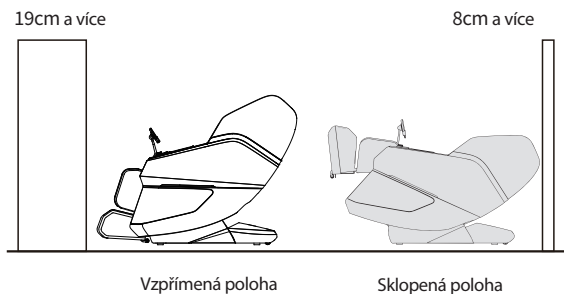

### Přesun masážního křesla

Zvedněte přední část masážního křesla a posuňte jej ručně.

Upozornění: Přemísťujte křeslo pouze samotné křeslo, abyste předešli převrácení. Netahajte nebo neposouvajte kolečka po podlahách, které jsou náchylné k poškrábání. Při přemísťování nezvedejte sedací část a nohy křesla. Při zvedání masážního křesla věnujte pozornost přední části.

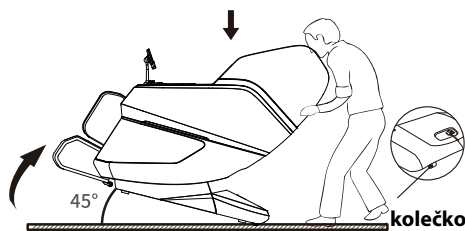

## V Instalace produktu

Vyberte masážní křeslo a příslušenství z krabice.


Masážní Křeslo

Boční panely

Příslušenství

Ovládací panel

Uživatelská příručka a napájecí kabel

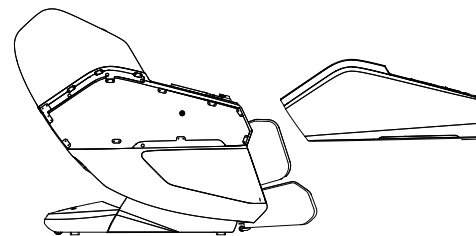

Tip  
Příslušenství je zabaleno v zvláštních baleních. Používejte příslušenství, které je v balení.


### Postup instalace před použitím křesla



① Kabel světelného panelu připojte ke zásuvce.

② Zasuňte boční obkladové panely do vyhrazených drážek.


### Postup instalace ovládacího panelu

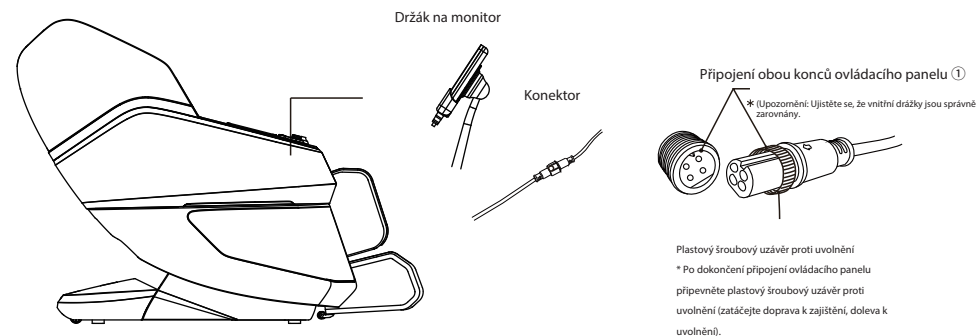


Plastový šroubový uzávěr proti uvolnění  
\* Po dokončení připojení ovládacího panelu připevněte plastový šroubový uzávěr proti uvolnění (zatačteje doprava k zajištění, doleva k uvolnění).

## VI Údržba a metody skladování

### Údržba

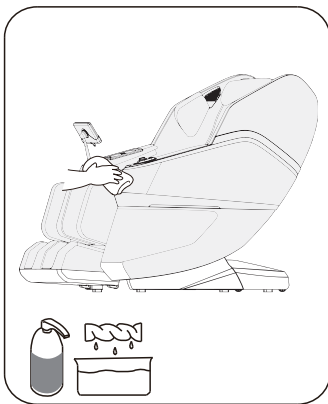


- Použijte suchý hadřík k otření potu.
- Při čištění skvrn použijte nízkokonzentrovaný neutrální čistící prostředek.
- Navlhčete jemný hadřík, dobře jej vyždímejte a jemně otřete masážní kreslo.

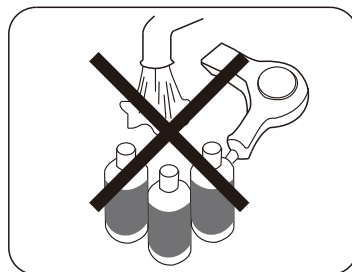

- Při čištění masážního křesla musí být připojení na elektrinu odpojeno. Kromě toho se nedotýkejte napájecího konektoru mokřými rukama.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů na sušení potu na masážním křesle.
- Nepoužívejte vodu k čištění masážního křesla.
- Nepoužívejte benzin, ředidlo, zásadité čistící prostředky, bělidla a podobné látky.

### Skladování

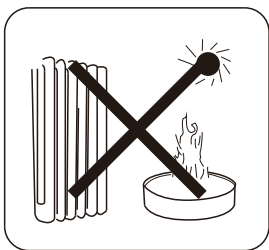

- Neumísťujte křeslo na přímé sluneční světlo delší dobu, abyste předešli zabarvení nebo poškození.
- Také jej nevystavujte vysokým teplotám, jako jsou topná zařízení a krby, abyste předešli zabarvení nebo poškození.

## VII Připojení Bluetooth k přehrávání hudby

**Krok 1:** Zapněte hlavní vypínač masážního křesla.


**Krok 2:** Zapněte Bluetooth na vašem telefonu a vyhledejte dostupná Bluetooth zařízení.

**Krok 3:** Po vyhledání najděte "NEDES massage1" v sekci "Bluetooth zařízení" a připojte se.


**Krok 4:** Otevřete na svém telefonu aplikaci pro přehrávání hudby a začněte přehrávat hudbu.

#### Tip


- ▶ Různé systémy mobilních telefonů mohou mít odlišné způsoby připojení přes Bluetooth. Prosím, připojte se k Bluetooth podle způsobu připojení, který je specifický pro váš typ telefonu.

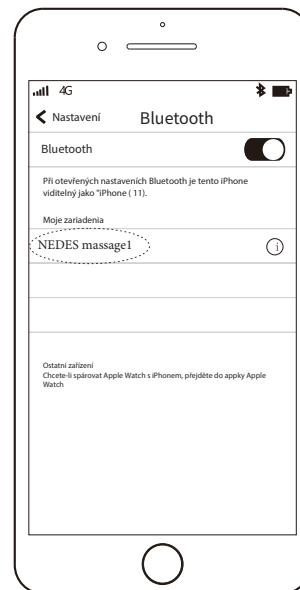

## VIII Popis jednotlivých částí křesla

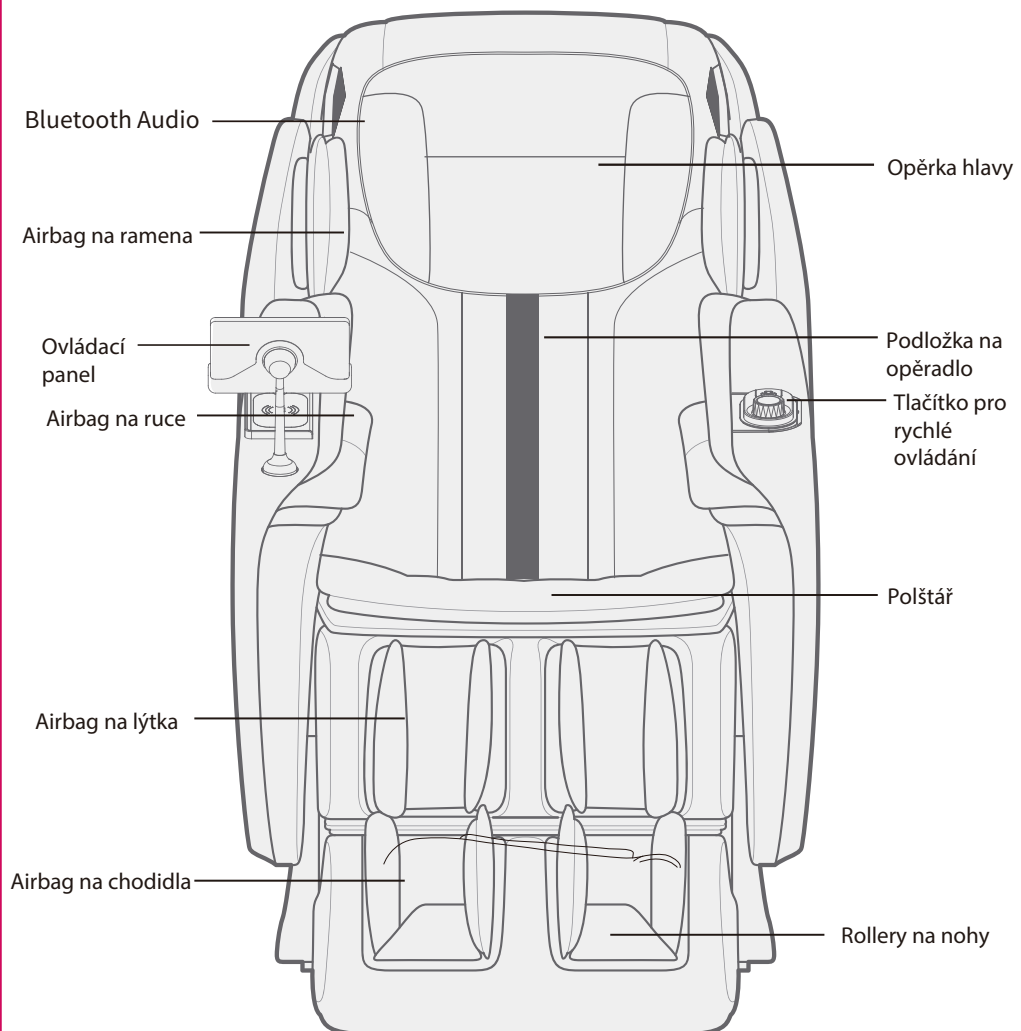

## IX Ovládací panel

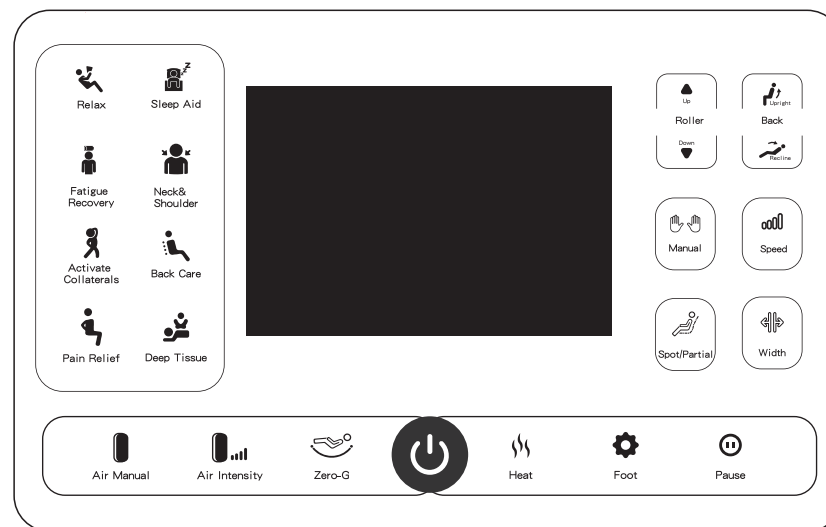

## X Pokyny k obsluze masážního křesla

I. Prosím, věnujte pozornost následujícím záležitostem při používání tohoto produktu:

1. Zapněte napájení. Stiskněte spínač na sedací konstrukci masážního křesla do polohy "I". Masážní křeslo přejde do resetovacího stavu. V této době bude křeslo v pohotovostním režimu, přičemž červené světlo na tlačítku zapnutí/vypnutí bude svítit stále.
2. V pohotovostním režimu lze ovládat pouze následující funkce: zapnutí/vypnutí, zpětný chod, posun dozadu, zvednutí nohou, spuštění nohou a režim nulové gravitace.

II. Popis funkcí tlačítek ovládacího panelu









### On/Off Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu spuštění a aktivujete automatický masážní program „Relax“.

### Tlačítka osmi automatických programů:

<b>Relax</b>	<b>Sleep Aid</b>	<b>Fatigue Recovery</b>	<b>Pain Relief</b>
<b>Neck &amp; Shoulder</b>	<b>Activate Collaterals</b>	<b>Back Care</b>	<b>Deep Tissue</b>

### Stisknutím tlačítek osmi automatických programů se aktivuje výchozí čas 15 minut.

-  **Relax** Masážní intenzita je jemná, zahrnuje celé tělo, efektivně uvolňuje tělo a mysl, podporuje krevní oběh a odstraňuje únavu.
-  **Fatigue Recovery** Zmírňuje únavu a bolestivost po celém těle, poskytuje úlevu pro záda a končetiny.
-  **Activate Collaterals** Zaměřuje se na meridiány na zlepšení mikrokrevního oběhu v těle a posílení imunitního systému.
-  **Pain Relief** Pro osoby se sedavým zaměstnáním masáž zvyšuje množství tělesného pohybu, uvolňuje stres a zlepšuje funkci těla.
-  **Sleep Aid** Intenzita je jemná, vhodná pro ženy, využívá techniky hnětení a akupresury, kombinované s nízkotlakou vzduchovou masáží. Pomocí akupresurních bodů pomáhá tělu regulovat rovnováhu a rychle zlepšit spánek.
-  **Neck & Shoulder** Unikátní masážní techniky pro ramena a krk pomáhají podpořit krevní oběh a ulevit od bolesti a napětí v oblasti krku a ramen.
-  **Back Care** Na základě křivek lidského těla se masáž zaměřuje na oblasti zad a beder, čímž účinně uvolňuje páteř.
-  **Deep Tissue** Intenzivnější masáž s postupným uvolňováním celého těla účinně zmírňuje bolestivost a odstraňuje únavu.



V manuálním režimu stisknutím tohoto tlačítka posouváte pohyb nahoru nebo dolů.



V manuálním režimu stisknutím tohoto tlačítka se zvedá nebo spouští opěradlo.



Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do manuálního režimu a přepínáte masážní techniky. K dispozici je šest technik: hnětení, poklepávání, bouchání, akupresura, hnětení a klepání, a perkuse.  
**Ikony zobrazující techniky:**



Tlačítko pro nastavení intenzity masáže: Stisknutím tohoto tlačítka v manuálním režimu můžete upravit rychlost masáže. Intenzita je nastavitelná na úrovních, přičemž třetí stupeň představuje maximální intenzitu. (Poznámka: Intenzitu masáže lze upravit pouze v manuálním režimu.)



Stisknutím tlačítka Fix Point/Interval v manuálním režimu se postupně přepíná mezi režimy: fixovaný bod a intervalový cyklus.



Tlačítko pro nastavení šířky pohybu umožňuje úpravu ve čtyřech manuálních režimech: prstová masáž/poklepávání/bouchání/klepání. Můžete nastavit šířku pohybu na tři úrovně: široká, střední a úzká.



Tlačítko pro nastavení částí airbagů: Stisknutím tohoto tlačítka v manuálním režimu se cyklicky přepíná mezi airbagem na rukou, airbagem na ramenou, airbagem na nohou a chodidlech a vypnutím airbagu.



Tlačítko pro nastavení intenzity airbagů: Stisknutím tohoto tlačítka v manuálním režimu se cyklicky přepíná mezi 1-3 úrovněmi intenzity.



Tlačítko Zero Gravity: Stisknutím tohoto tlačítka se postupně nastavují režimy nulové gravitace: 1. stupeň - 2. stupeň - vypnout, v uvedeném pořadí.



Tlačítko Heat (Teplota): Stisknutím tohoto tlačítka v manuálním i automatickém režimu se zapíná nebo vypíná vyhřívání.



Tlačítko Foot Rollers (Rollery na nohy): Stisknutím tohoto tlačítka v manuálním režimu se zapíná nebo vypíná masáž s rollery na nohy.



Tlačítko Pause (Pozastavit): Stisknutím tohoto tlačítka se pozastaví všechny akce. Stisknutím tlačítka znovu se opět zapnou.